


Liko™ Multirall™ 200

Una grúa de techo para necesidades flexibles

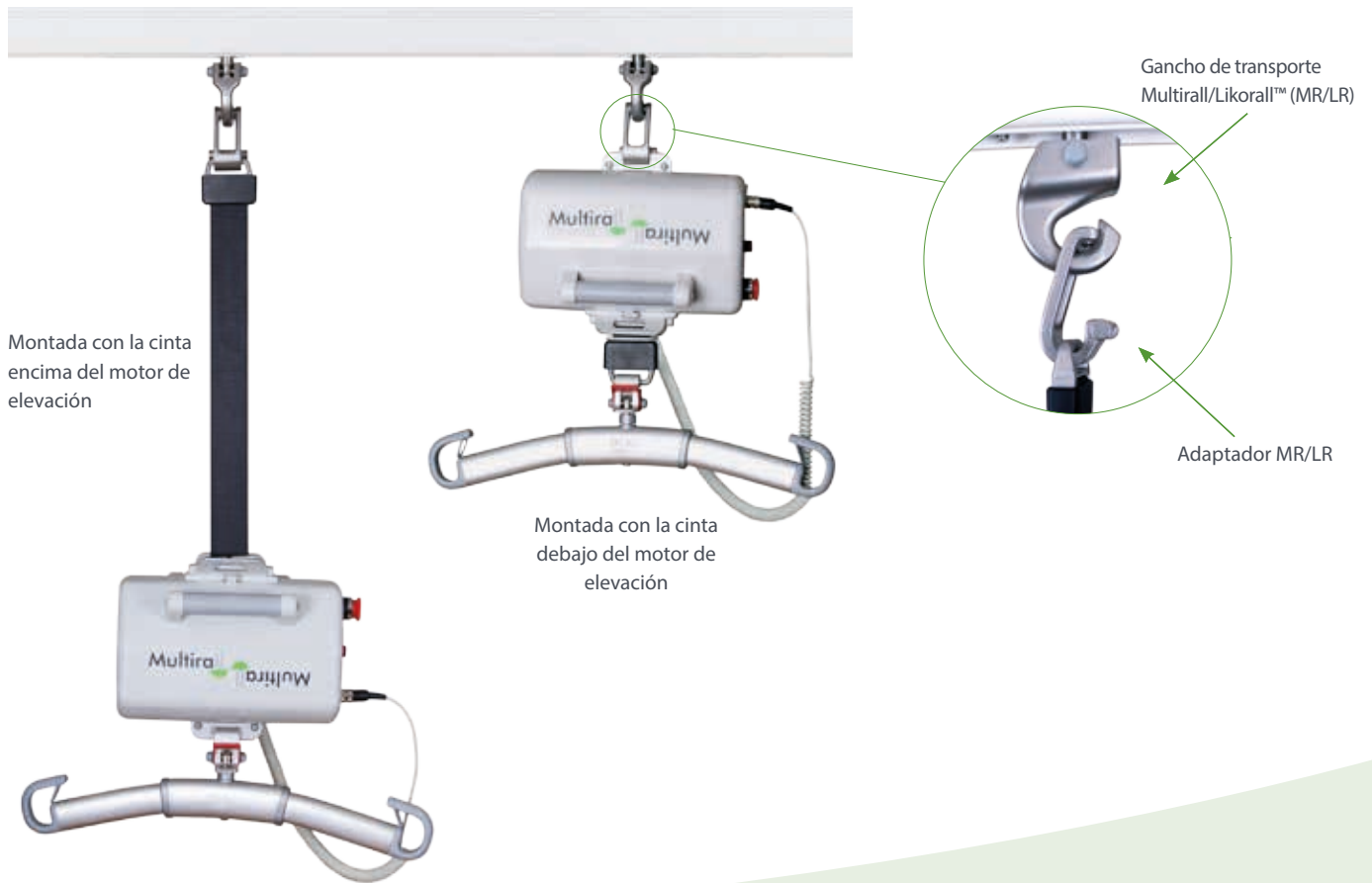

En algunos entornos asistenciales, como los hospitales y las residencias de ancianos, las necesidades de elevación pueden variar en función de la movilidad de los pacientes. Las grúas de techo portátiles constituyen una buena alternativa a las grúas móviles. Multirall es una opción rentable de grúa de techo portátil. También se utiliza para trasladar pacientes de una habitación a otra en posición sentada, al permitir moverlos con facilidad de un sistema de raíl a otro con la cinta de transferencia.

Prestaciones y beneficios

Se puede montar de dos formas:

1. Con la cinta debajo del motor de elevación si éste no se va a trasladar. Con la cinta encima del motor de elevación si éste se va a trasladar.

El adaptador MR/LR ofrece un punto de conexión seguro y fácil de utilizar entre la grúa Multirall y el gancho de anclaje de Multirall/Likorall™ (MR/LR), con independencia del modo en que esté montada.

Fácil de mover con el adaptador opcional para brazo de extensión MR; no se requieren herramientas.

Las grandes asas ubicadas a cada lado del motor **facilitan el transporte**.

Se puede utilizar con todos los sistemas de raíl Liko, entre los que se incluye la opción autónoma FreeSpan™.

Ofrecemos una amplia gama de accesorios entre los que se incluyen arneses, perchas, básculas y el carro Multirall.

Liko Multirall 200

Especificaciones técnicas

Carga segura de trabajo	200 kg
Peso del motor de elevación	8,7 kg
Opciones de percha	Mini Slingbar 220, Percha universal 350, Universal 450, Universal 600, Percha doble universal TwinBar 670, Perchas cruzadas
Conexiones de percha	Cambio rápido
Clase de seguridad del motor de elevación	IP 30
Descenso de emergencia	manual y eléctrico
Velocidad de elevación	60 mm/s

Intervalo de elevación	1600 mm
Nivel de ruido	62,2 dB(A)
Batería	2 x 12 V CC (2,4 Ah - 2,6 Ah) plomo ácido regulado por válvula baterías de tipo gel
Cargador de la batería	carga de pared
Mando manual	alámbrico
Clase de protección del mando manual	IP 43
Código de producto	3130001

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de atención al paciente que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, los programas y los productos de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario y en todo el mundo**.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Liko Multirall 200 se ha diseñado para utilizarse en todas las situaciones habituales de elevación y transferencia de pacientes, por ejemplo, entre la cama y la silla de ruedas, a y desde el suelo, visitas al baño, entrenamiento de la marcha, y para las elevaciones horizontales con camillas.

Clase: I

Fabricante: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suecia

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad y de la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5ES183328-01, 05 septiembre 2017

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom